

Synlab Normandie	Recommandations aux préleveurs externes pour les prélèvements naso-pharyngés pour PCR Covid 19	MU-PR-IT-077 V 04 Applicable le 18/10/2023
---------------------	---	---

Objet : recommandations pré-analytiques pour les prélèvements naso-pharyngés effectués en dehors du laboratoire.

Destinataires : Infirmiers/ères libéraux, établissements de soin, agents de la sécurité civile.


1- Matériel :

- Un masque FFP2 (vérifier l'étanchéité ++)
- Les lunettes de protection
- Blouse jetable + capuche ou charlotte jetables
- 1 paire de gants jetables après chaque prélèvement.
- Ecouillons stériles
- Tube de milieu de transport PCR fourni par le laboratoire
- Sachet de transport du laboratoire

2- Renseignements administratifs/cliniques

Remplir le formulaire de renseignement du laboratoire : les informations demandées sont nécessaires pour une bonne prise en charge du patient en cas de positivité du test (symptômes, vaccination, n° portable, adresse mail, consentement Sidep).

3- Le prélèvement naso-pharyngé (pnp) :

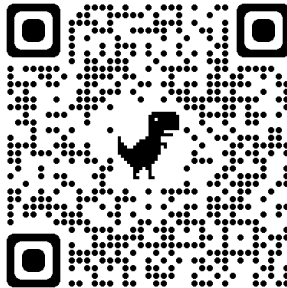

4- Déchargement dans le flacon de transport

Important : dans les petits tubes 1ml (Sansure Biotech) : Bien décharger l'écouvillon puis le jeter, ne pas le casser et ne pas le laisser dans le tube. Identifier le tube (nom, prénom, DDN) à l'aide d'une étiquette (fournie par le laboratoire).

5- Emballage

Mettre le tube SEUL dans le sachet du laboratoire, bien refermer. Joindre dans la pochette extérieure la feuille de renseignements, l'ordonnance et tout autre justificatif de dispense d'avance de frais. Transmettre au laboratoire dans le respect du triple emballage.

6- Délai de transmission au laboratoire

Le prélèvement sur tube de 1ml (Sansure Biotech) doit arriver au laboratoire de Louviers avant 12 heures pour un rendu de résultat le jour même. Au-delà et pour tout autre type de tube, le résultat sera rendu avec un délai pouvant aller jusqu'à 48 heures.

